




CRYSTAL

SPECIAL CERAMIC PASTE FOR ZIRCONIA AND LITHIUM DISILICATE

3D NA ANATOMICZNYCH system nanoceramiczny

pobierz katalog



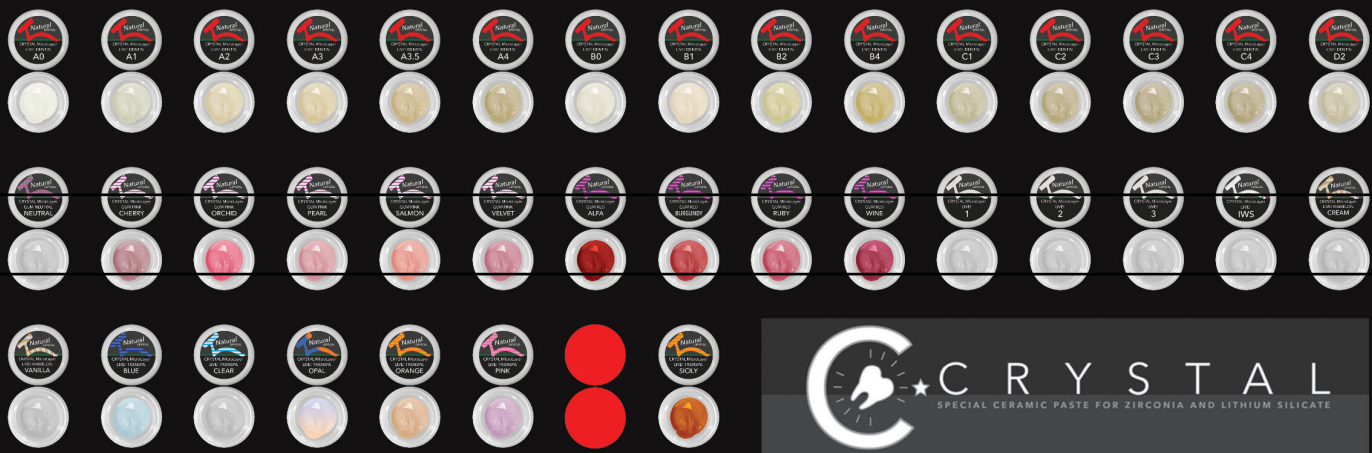

Natural Ceramic System to dynamiczny system ceramiczny stworzony przez Tressis Italia, który oferuje specjalny żel ceramiczny – CRYSTAL – do malowania mikro-warstwowego.

System CRYSTAL składa się z dwóch zestawów: CRYSTAL LIVE! masy do mikro-warstwowania różnych obszarów zęba z pełną grupą kolorów A-D i masy CRYSTAL GUM do charakteryzowania tkanek miękkich.

Z masami ceramicznymi systemu CRYSTAL można uzyskać wysoką estetykę i efekty specjalne, takie jak: podkreślenie obszarów siecznych, charakteryzowanie głębi, tworzenie linii pęknięć, zaznaczanie mamelonów itp.

Z CRYSTAL możesz uzyskać optymalne rezultaty, porównywalne z tradycyjną ceramiką warstwowaną, przy bardzo małych grubościach żelu (0,1- 0,25 mm) o odpowiedniej konsystencji i stabilności – co pozwala na budowanie złożonych efektów na powierzchniach modelowanych pędzlem oraz umożliwia zwiększenie efektu estetycznego przy pomocy faktowania powierzchni. Temperatura wypalania mas CRYSTAL jest niska i nie zmienia stabilności koloru cyrkonu ani precyzyjnie wykonanych elementów z ceramiki zintegrowanej z podbudową - dlatego może być stosowana do korygowania kształtów i budowania dowolnych efektów na każdej ceramice dentystycznej.